



補聴器で
HAPPY LIFEを
はじめよう。



RIONETCLASSE

リオネットクラッセ



「音」と「幸せ」を はこぶ補聴器。

快適な聞こえと、目立ちにくく使いやすいデザイン。

新しい「リオネットクラッセ」は、
もっと気軽に補聴器ライフを楽しんでいただきたい。

そんな思いから誕生した補聴器です。

補聴器がはこんでくれる「音」と一緒に、
あなたも「HAPPY LIFE」をはじめませんか？



快適な聞こえをサポートする機能

騒がしい場所でも 快適

エアコンや換気扇などの騒音を効果的に低減します。



不快な衝撃音を 低減

食器を洗うときの「カチャカチャ」という音や、ドアを閉める音などの不快な衝撃音を低減します。



不快なピーピー音を 防ぐ


電話の際に起こりやすい不快なピーピー音(ハウリング)を自動的に起きにくくします。



オープンフィッティングに 対応

耳穴を完全にふさがらない「オープン耳せん」や「オーバルベント(大きな通気穴)」に対応。自分の声のひびきやこもり感を軽減します。

※「スプラッシュ」を除く。

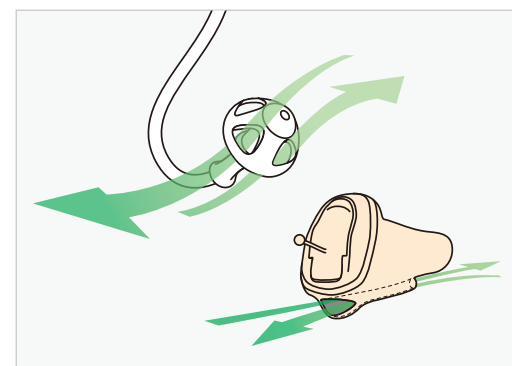

使いやすさ・安心・デザイン

電池交換が簡単

リオネット独自の「おまかせ回路」で、電池のプラス・マイナスの向きを気にせずに電池を交換することができます。



汗や湿気に強い

汗や湿気などから補聴器を守る「耐汗コート」が耐久性を高めます。



防水・防じん性能

「スプラッシュ」は防水・防じん保護等級IP65/IP68に適合。シャワーを浴びるときもお使いいただけます。



スプラッシュ HB-W1CL

選べるスタイル&カラー

耳穴に入れるオーダーメイドタイプや耳にかける耳かけ型からお選びいただけます。また、耳かけ型は豊富なカラーバリエーションをご用意。選ぶ楽しさが生まれます。

充実した保証制度

自然故障に対する無料修理制度や防水点検プログラム、事故保険など、リオネットならではの充実した保証制度を設けています。






※詳しくは11ページをご参照ください。

こだわりの国内生産





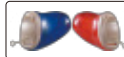

国内生産にこだわり、常に高い品質を提供します。



主な機能一覧

			
		 <p>新機種</p> <p>軽度 中等度 高度</p>	 <p>新機種</p> <p>軽度 中等度 高度</p>
型式		HI-C1CL	HI-C2CL
		スーパーミニカナル(CIC)	カナルエイド
希望小売価格	両耳(2台)	266,000円 (1台あたり133,000円)	266,000円 (1台あたり133,000円)
	片耳(1台)	148,000円	148,000円
聴力に合わせて細かく調整		GAIN(利得調整器) 6バンド・	
騒がしい場所でも快適		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
不快なピーピー音を防ぐ		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
不快な衝撃音を低減		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
正面からの音を聞きとりやすくする		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
スタート時間設定機能		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電池交換お知らせ音		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
携帯電話ノイズ対策		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
おまかせ回路		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
耐汗コート		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
防水・防じん		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
誘導コイル		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
外部入力端子		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
オープンフィッティング		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マルチメモリー機能		<input type="radio"/> *3	<input type="radio"/> *3
ミュート機能		<input type="radio"/> *3	<input type="radio"/> *3
主なオプション		 左右を分かりやすくしたカラーシェル(無料) 対応機種:HI-C1CL	

●補聴器は非課税です。 *1 RIC:Receiver in the canal *2 RITE:Receiver in the ear *3 メモリー切替ボタン搭載時のみ *4 EXスモールイヤホンのみ

 			
 <p>性能アップ</p> <p>EXスモールイヤホン*1</p> <p>軽度 中等度</p> <p>EXスモールイヤホン</p> <p>EXスモールイヤホン*1</p> <p>軽度 中等度 高度</p> <p>メディアムイヤホン*2</p> <p>軽度 中等度 高度</p>	 <p>性能アップ</p> <p>EXパワーイヤホン</p> <p>EXパワーイヤホン*2</p> <p>中等度 高度 重度</p> <p>メディアムイヤホン</p> <p>メディアムイヤホン*2</p> <p>軽度 中等度 高度</p>	 <p>新機種</p> <p>フック</p> <p>軽度 中等度 高度</p>	
型式	HB-J1CL	HB-W1CL	HB-G9CL
	耳かけ型	耳かけ型	耳かけ型
希望小売価格	212,000円 (1台あたり106,000円)	248,000円 (1台あたり124,000円)	176,000円 (1台あたり88,000円)
	118,000円	138,000円	98,000円
聴力に合わせて細かく調整	CRC(ノンリニア調整器) 2チャンネル・OPC(出力制限装置) 2チャンネル		
騒がしい場所でも快適	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
不快なピーピー音を防ぐ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
不快な衝撃音を低減	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
正面からの音を聞きとりやすくする	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
スタート時間設定機能	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
電池交換お知らせ音	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
携帯電話ノイズ対策	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
おまかせ回路	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
耐汗コート	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
防水・防じん	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
誘導コイル	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
外部入力端子	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
オープンフィッティング	<input type="radio"/> *4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *5
マルチメモリー機能	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ミュート機能	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
主なオプション	 メモリー切替ボタン 対応機種:HI-C2CL(無料) HI-C1CL(有料)	イヤホンクロス(有料)** 対応機種:HB-G9CL	FM補聴システム(有料)** 対応機種:HB-W1CL、HB-G9CL

*5 Sチューブ、オープン耳せん(別売品) **詳しくは販売店までお問い合わせください。

性能一覧

型式		HI-C1CL	HI-C2CL
		スーパーミニカナル (CIC)	カナルエイド
最大音響利得	HFA [±5dB]	41dB	47dB
	ピーク値 [+3dB以下]	46dB	51dB
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA [±4dB]	107dB	117dB
	ピーク値 [+3dB以下]	112dB	119dB
誘導コイル入力の最大感度レベル [±6dB]		—	—
電池		PR536	PR41
電池寿命(時間)*		約105~155	約160~235
適応難聴*		軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度
		~80dBHL	~90dBHL
		伝音難聴・感音難聴・混合性難聴	

●測定値はJIS C 5512:2015による。(※を除く) ●【 】内は許容差を表します。●電池寿命は使用条件により異なります。

HB-J1CL		HB-W1CL		HB-G9CL
EXスモールイヤホン	ミディアムイヤホン	EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン	フック
38dB	41dB	61dB	42dB	56dB
42dB	45dB	67dB	46dB	62dB
104dB	113dB	124dB	114dB	127dB
110dB	116dB	129dB	116dB	132dB
—	—	96dB	77dB	89dB
PR41	PR41	PR48	PR48	PR48
約235	約190	約350	約325	約265
軽度・中等度	軽度・中等度・高度	中等度・高度・重度	軽度・中等度・高度	軽度・中等度・高度
~70dBHL	25~85dBHL	50~100dBHL	25~85dBHL	~100dBHL
伝音難聴・感音難聴・混合性難聴				

カラーバリエーション

HB-J1CL								
	プラチナ シルバー	シャンパン ゴールド	シルキー ベージュ	コーヒー ブラウン	プレミアム ブラック	ピンク サファイア	ブルー サファイア	
HB-G9CL								
	フレッシュ グレー	ベージュ	カフェラテ	チョコレート	シャドウ ブラック	ローズ ピンク	スカイ ブルー	
HB-W1CL	ケース3色			マイクカバー9色				
								
	グレー	ベージュ	シャドウ ブラック	ナチュラル ホワイト	ベージュ	シャドウ ブラック	パッション レッド	マリン ブルー
	クール グレー	チョコレート	フォレスト グリーン	ローズ ピンク				

リオネットならではの充実した保証制度

2年間の無料修理

お買い上げの日より2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします。
(ただし、スプラッシュの防水性能保証は1年)

120日以内の無料調整 (オーダーメイド補聴器)

お買い上げの日より120日以内に、オーダーメイド補聴器の形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも調整いたします。

120日以内の無料再製作 (オーダーイヤチップ)

お買い上げの日より120日以内に、オーダーイヤチップの形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも再製作いたします。

防水点検プログラム (スプラッシュ)

お買い上げ時の防水性能保証の終了後も、お買い上げから2年間で1回の「防水点検」を無料で受けられるサービスです。「防水点検」の防水性能保証期間は最大で1年間です。詳しい内容は販売店までお問い合わせください。

火災・盗難などに あったときの事故保険

補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に破損、盗難、火災にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。

本社・営業部	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL.042-359-7880 FAX.042-359-7441	〒185-8533
東京営業所	東京都文京区本郷2-27-8(太陽館ビル) TEL.03-3818-4133 FAX.03-3818-4140	〒113-0033
仙台営業所	仙台市太白区南大野田25-13 TEL.022-249-5533 FAX.022-249-5535	〒982-0015
西日本営業所	大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル) TEL.06-6363-4133 FAX.06-4797-0111	〒530-0001
国分寺補聴相談室	東京都国分寺市東元町3-20-41 TEL.042-359-7833 FAX.042-359-7440	〒185-8533
新宿補聴相談室	東京都渋谷区代々木2-7-7(南新宿277ビル) TEL.03-3379-9333 FAX.03-3379-2564	〒151-0053
大阪補聴相談室	大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル) TEL.06-4797-0033 FAX.06-4797-0111	〒530-0001

関東リオン(株)	さいたま市浦和区仲町3-11-2 TEL.048-824-1205 FAX.048-824-8885	〒330-0062
東海リオン(株)	名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル) TEL.052-954-1733 FAX.052-954-1734	〒460-0004
九州リオン(株)	福岡市博多区冷泉町5-1-8 TEL.092-281-5361 FAX.092-291-2847	〒812-0039

⚠ ご注意

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。●補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。●補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、着用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

販売名:補聴器HI-C1CL 医療機器認証番号:223AABZX00067A06
販売名:補聴器HI-C2CL 医療機器認証番号:224AABZX00189A05
販売名:補聴器HB-J1CL 医療機器認証番号:225AABZX00098A01

販売名:補聴器HB-W1CL 医療機器認証番号:225AABZX00110A01
販売名:補聴器HB-G9CL 医療機器認証番号:228AABZX00018A01

🌿この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。
※このカタログ掲載の商品の希望小売価格はあくまで参考価格であり、販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。
※このカタログ掲載の商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
※このカタログ掲載の商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
※本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。

